


产品信号：OEM-EYB209-211

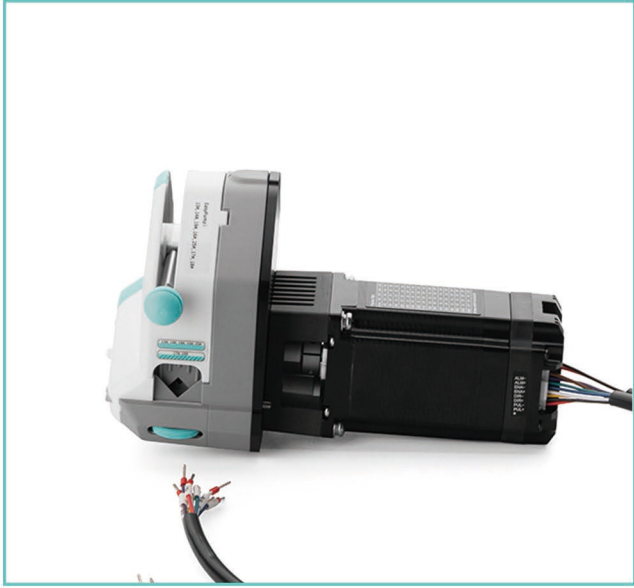

流量范围

泵头型号	单/双通道	软管壁厚(mm)	是否可调压
EasyPump I	单通道	1.6	不可调压
EasyPump II	单通道	2.4	不可调压
EasyPump V	双通道	1.6	不可调压


泵头型号	单/双通道	软管壁厚(mm)	是否可调压
EasyPump III	单通道	1.6	可调压
EasyPump IV	单通道	2.4	可调压
EasyPump VI	双通道	1.6	可调压

泵头型号	软管	内径x壁厚(mm)	mL/r	流量范围(mL/min) (转速0.1-600rpm)	软管承压(Mpa)		重量(kg)
					间断	连续	
单通道 EasyPump I/III (适用1.6mm壁厚软管)	13#	0.8x1.6	0.053	0.0053-32	0.27	0.17	0.6
	14#	1.6x1.6	0.27	0.027-162			
	19#	2.4x1.6	0.55	0.055-330			
	16#	3.2x1.6	0.933	0.093-560			
	25#	4.8x1.6	1.967	0.197-1180	0.24	0.14	
	17#	6.4x1.6	3.333	0.333-2000	0.14	0.10	
	18#	7.9x1.6	4.3	0.430-2580	0.10	0.07	
单通道 EasyPump II/IV (适用2.4mm壁厚软管)	15#	4.8x2.4	1.8	0.180-1080	0.27	0.17	
	24#	6.4x2.4	2.733	0.273-1640			
	35#	7.9x2.4	3.833	0.383-2300	0.24	0.14	
	36#	9.6x2.4	5.167	0.517-3100			
双通道 EasyPump V/VI (适用1.6mm壁厚软管)	13#	0.8x1.6	0.053	0.0053-32	0.27	0.17	
	14#	1.6x1.6	0.27	0.027-162			
	19#	2.4x1.6	0.55	0.055-330			
	16#	3.2x1.6	0.933	0.093-560			
	25#	4.8x1.6	1.967	0.197-1180	0.24	0.14	

技术参数

产品型号	OEM-EYB209-211
转速范围	0.1-600rpm
流量范围	0.0053-3100mL/min
控制方式	无源开关量信号或者有源开关量信号(3.3V-5V)控制启停、换向
控制方式信号逻辑	光耦导通运行/截止运行(可通过上位机软件修改)
运行模式	固定转速/外部模拟量输入模式(可通过拨码开关选择)
电机类型	闭环步进一体机
输出信号	集电极开路输出
调速方式	OEM-EYB209:外部模拟量调速4-20mA
	OEM-EYB210:外部模拟量调速0-5V
	OEM-EYB211:外部模拟量调速0-10V
工作电源	DC24V-DC36V(推荐DC36V), >100W
工作环境	0-40°C, <80%RH无凝露


尺寸图 (单位: mm)

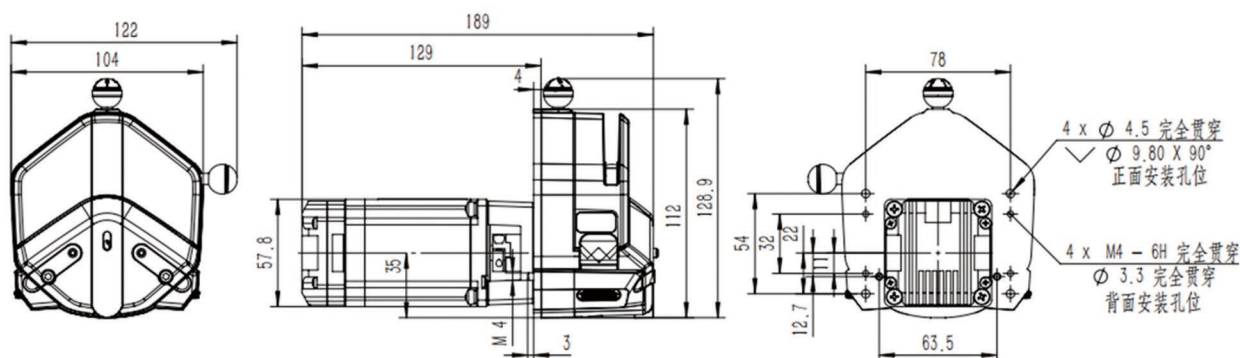


■ 安装步骤




1. 逆时针扳动扳杆 180°，
打开压块。

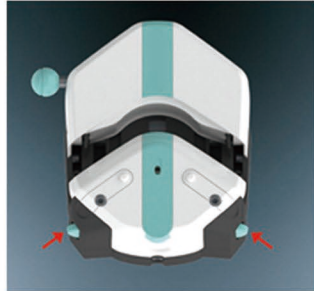

2. 搓轮调整。

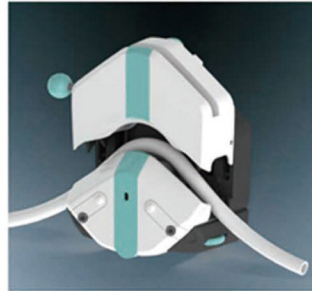

3. 将软管自然放入上压块和
滚轮之间。

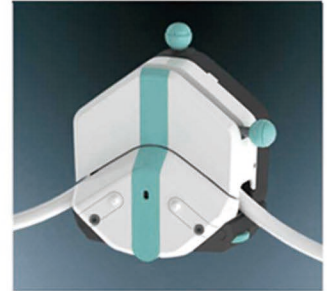

4. 顺时针扳动扳杆 180°，使
压块下压到位，压紧软管。