


产品信号：OEM-KDB204-206

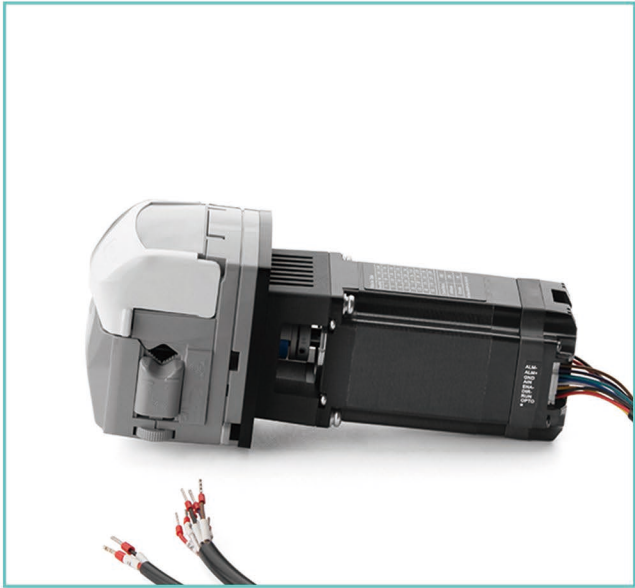


流量范围

泵头型号	软管	内径x壁厚(mm)	(转速0.1-600rpm)	(转速0.1-600rpm)	软管承压Mpa		重量(kg)
			流量范围mL/min(3滚轮)	流量范围mL/min(4滚轮)	间断	连续	
KD15	13#	0.8x1.6	0.0083-50.3	0.0079-47.37	0.27	0.17	0.37
	14#	1.6x1.6	0.0281-168.4	0.0267-160.37			
	19#	2.4x1.6	0.0613-367.97	0.0544-326.13			
	16#	3.2x1.6	0.1006-603.5	0.0942-565.47	0.24	0.14	
	25#	4.8x1.6	0.2243-1345.83	0.2103-1262			
	17#	6.4x1.6	0.3297-1978.1	0.2915-1748.93			
	18#	7.9x1.6	0.5047-3027.97	0.4483-2690	0.10	0.07	
KD25	15#	4.8x2.4	0.2513-1507.6	0.1979-1187.55	0.27	0.17	
	24#	6.4x2.4	0.3912-2346.95	0.2909-1745.5			

技术参数

转速范围	0.1-600rpm
流量范围	0.00079-3027.97mL/min
控制方式	无源开关量信号或者有源开关量信号（3.3V-5V）控制启停、换向
控制方式信号逻辑	光耦导通运行/截止运行（可通过上位机软件修改）
运行模式	固定转速/外部模拟量输入模式（可通过拨码开关选择）
电机类型	闭环步进一体机
输出信号	集电极开路输出
调速方式	OEM-KDB204:外部模拟量调速4-20mA
	OEM-KDB205:外部模拟量调速0-5V
	OEM-KDB206:外部模拟量调速0-10V
工作电源	DC24V-DC36V（推荐DC36V）， $\geq 100W$
工作环境	0-40℃，<80%RH无凝露

尺寸图（单位：mm）

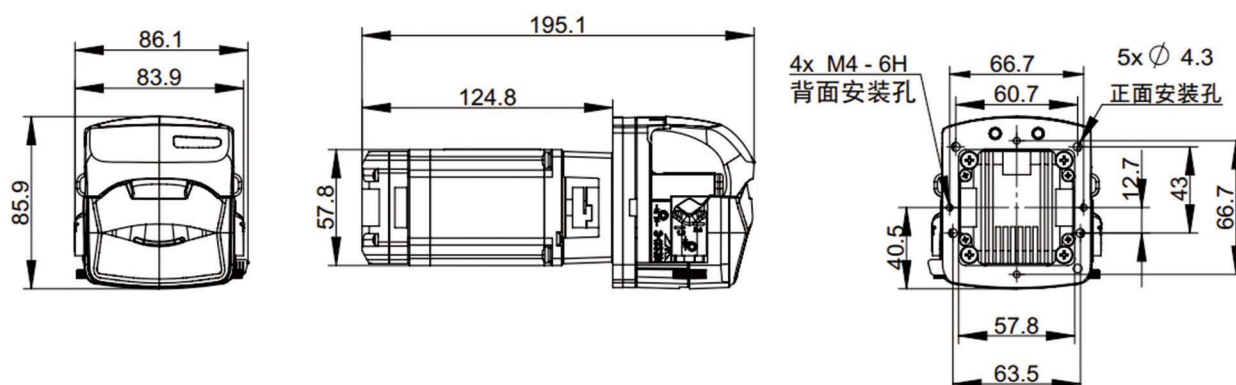

■ 安装步骤



1. 向上掀开泵头上翻盖，
打开泵头。



2. 搓轮调整。



3. 将软管放入泵头。



4. 向下合上泵头上翻盖，
完成软管安装。