

## 新一代易装型泵头

产品型号：UT35

流量范围：2.252-18000mL/min



### ■ 产品简介

全新 UT35 泵头专为高效与安全而生。突破大流量段行业瓶颈，实现免工具极速换管，搭配连续软管与管接头双模卡管方式，轻松应对复杂工况。创新可调式滚轮总成，在精准微调出口压力的同时，有效延长软管寿命，降低耗材成本。更标配开盖即停保护，全方位守护操作安全，让每一次流体传输都高效、安心。

### ■ 产品特点

- 有连续软管和管接头方式两种卡管方式。
- 有开盖停功能，增加使用安全性。
- 弹性滚轮总成，延长软管使用寿命。
- 可简单操作微调泵头压力。

## ■ 参考流量

| 泵头型号    | 适用软管 |               | 毫升/转  | 转速 0.1-265rpm    | 软管承压 Mpa |     | 滚轮数 | 重量 (kg) |
|---------|------|---------------|-------|------------------|----------|-----|-----|---------|
|         | 管号   | 内径×壁厚<br>(mm) |       | 参考流量范围<br>mL/min | 间断       | 连续  |     |         |
| UT35(4) | 12x4 | 12x4          | 34.34 | 3.434-9100       | 0.12     | 0.1 | 四滚轮 | 4.65    |
|         | 17x4 | 17x4          | 55.85 | 5.585-14800      | 0.11     | 0.1 |     |         |

| 泵头型号    | 适用软管     |               | 毫升/转  | 转速 0.1-265rpm    | 软管承压 Mpa |      | 滚轮数 | 重量 (kg) |
|---------|----------|---------------|-------|------------------|----------|------|-----|---------|
|         | 管号       | 内径×壁厚<br>(mm) |       | 参考流量范围<br>mL/min | 间断       | 连续   |     |         |
| UT35(2) | 26#      | 6.4x3.3       | 22.52 | 2.252-5970       | 0.15     | 0.12 | 二滚轮 | 3.99    |
|         | 73#      | 9.6x3.3       | 24.15 | 2.415-6400       | 0.16     | 0.12 |     |         |
|         | 82#      | 12.7x3.3      | 42.26 | 4.226-11200      | 0.15     | 0.1  |     |         |
|         | 15.9x3.3 | 5.9x3.3       | 62.75 | 6.275-16630      | 0.15     | 0.12 |     |         |
|         | 12x4     | 12x4          | 41.5  | 4.150-11000      | 0.15     | 0.12 |     |         |
|         | 17x4     | 17x4          | 67.92 | 6.792-18000      | 0.13     | 0.12 |     |         |

## ■ 软管安装步骤

### 2滚轮泵头软管安装步骤




1. 按压开解锁，打开泵头



2. 将软管安装至泵头内，将其平顺的放置管卡对应位置。



3. 旋转滚轮总成，将滚轮通过板杆扳到工作位置。

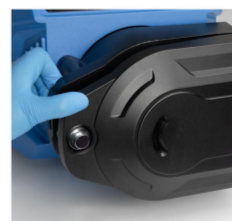

4. 合上泵头壳体，完成软管安装。

### 4滚轮泵头软管安装步骤



1. 按压开解锁，打开泵头



2. 将内置管组件安装至泵头内，管接头按压到对应凹槽内。



3. 旋转滚轮总成，将滚轮通过板杆扳到工作位置。



4. 合上泵头壳体，完成软管安装。

### 4滚轮泵头软管安装步骤



1. 准备工作软管、引流管、直通接头



2. 将直通接头短侧一端安装至工作软管一端



3. 将直通接头长侧一端安装至引流管一端



4. 完成安装状态

■ 尺寸图（单位：mm）

